


YH-MIP-0982 膏剂/凝胶/粉末显微镜法粒度仪

产品介绍

YH-MIP-0982 静态图像法粒度仪是按照《中国药典/0982粒度和粒度分布测定法-第一法-显微镜法》检查规定设计和研发的，符合药典检查规定。设备由高分辨光学显微镜、CCD摄像机、操作分析软件、数据处理系统等部分组成。可以对样品自动的进行粒度测试，同时给出粒度大小、数量、平均粒径、D10/25/50/90（可设置）、形貌等粒度及相关的颗粒形态学参数。广泛的应用于膏剂、乳膏、凝胶、原辅料等应用领域的质量检查。

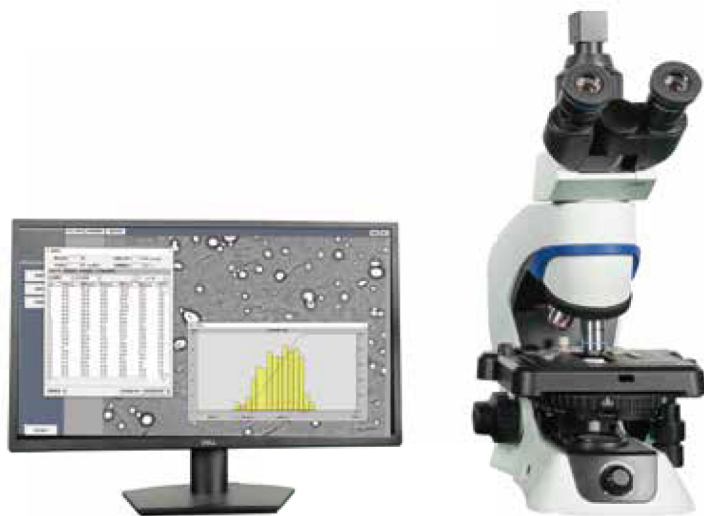

技术优势

- 1· 宽广的检查范围，0.2 μm -3000 μm ，结合不同的倍率的物镜；
- 2· 对单个视野或者多个视野进行颗粒自动统计，自动计数，自动出具粒度分布报告；
- 3· 丰富的数据展现形式、数据报告模板可选择，也可根据需求定制相关测试报告模板；
- 4· 配合半固体分散仪、真空粉末分散仪样品前处理装置，操作简单，数据稳定；
- 5· 符合 GMP 21CFR Part11 软件法规要求，包含审计追踪，权限管理，电子签名等。

技术参数

仪器型号	YH-MIP-0982
检查原理	显微镜法 / 静态图像法
相机	高清彩色相机 带录像功能
检查范围	0.2 μm -3000 μm 配置不同倍率大小物镜4X10X20X40X100X 可选配
计数准确性	$\leq 5\%$
重复性误差	$\leq 3\%$
检查模式	黑白 / 彩色 / 偏光模式
软件合规性	符合 GMP 21CFR Part11 法规要求
电源	220 V, 50 Hz